


COMMENT RÉALISER SON **AUTOTEST** NASAL ?



Les autotests sont destinés aux personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas des personnes contacts. Un formulaire est à remplir avant de procéder à l'autotest.

1

Se laver les mains, puis sortir les éléments de la boîte.

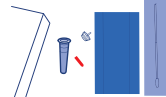



2



Retirer l'opercule du tube contenant la **solution réactive** et le placer à l'endroit prévu sur la boîte.

3

Sortir la **cassette** de son emballage, puis **sortir l'écouvillon** de son emballage.

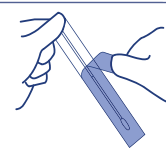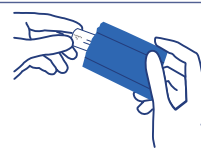


4



Enfoncer doucement l'écouvillon verticalement sur 2 à 3 cm dans une narine.

5

Basculer l'écouvillon et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance.

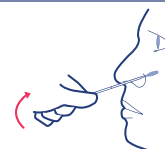


6



Réaliser un **mouvement de rotation**.

7

Essorer l'écouvillon dans la solution pendant 10 secondes et **mettre la tétine** compte-gouttes sur le tube.

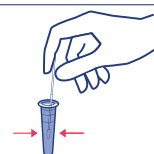

8



Déposer 4 gouttes de la solution dans le puit de la cassette. Patienter 10 à 15 minutes, avant de lire les résultats.

9

Si le résultat est **NÉGATIF**, retrouver le médiateur pour **enregistrer votre résultat et récupérer votre certificat de test**.

Si le résultat est **POSITIF**, s'isoler et effectuer immédiatement un **test PCR de confirmation** dans un laboratoire médical.

